



ISO 9001 : 2015
Certified Quality System

Indice:

- Da pagina 2 a pagina 4: **“Foto Sedia WC a secco ANKARA ” + “Certificato idoneità igienico-funzionale dell’ Università degli studi di Catania”**
- Da pagina 5 a pagina 6: **“Istruzioni d’uso Sedia WC a secco ANKARA”**

Link Youtube **“Sedia WC a secco ANKARA”**:

<https://youtu.be/KU7FafinUww>

Per tutti gli altri dettagli, visitare il nostro sito internet: <https://www.commercialesiculasrl.com>

Per ulteriori chiarimenti inviare una e-mail a: info@commercialesicula.it

Oppure telefonare al: 0935 901585





UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



Sezione di Microbiologia

**Idoneità igienico-funzionale
della sedia wc a secco "ANKARA – Art. 3040"**

SI CERTIFICA

Che il giorno 09/12/2022 personale di questo Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche Sezione Microbiologia si è recato presso l'azienda della Commerciale Sicula s.r.l. ove è stata visionata e testata la sedia wc a secco mod. "ANKARA".

Si tratta di un servizio igienico che funziona senza il classico sciacquone ad acqua. Funziona senza allacciamenti idrici, fognari e senza necessità d'intervento di autospurgo (come, invece, accade per i bagni a funzionamento chimico).


Il funzionamento avviene tramite sacchetti (distribuiti dalla Commerciale Sicula s.r.l. con l'art. 30ST), costruiti in polietilene altamente riciclabile, dotati di un sistema di chiusura costituito dalla sovrapposizione tra la bordura superiore del sacchetto e la scanalatura del coperchio del sacchetto. All'interno del sacchetto, prima di ogni utilizzo, l'utente deve cospargere l'apposita bustina di poliacrilato di sodio - contenuta nella confezione - che ha la funzione di gelificare le sostanze fecali liquide e le urine e di mantenere sotto controllo igienico il contenuto organico.

Una volta usato, il sacchetto viene chiuso manualmente e può essere smaltito come un normale rifiuto domestico solido - in quanto le sostanze fecali liquide e le urine, come già detto, vengono gelificate.

Particolarmente degno di nota è il fatto che questa tipologia di servizi non necessita alcun intervento da parte di manutentori o macchinari vari; l'utente medio è nelle condizioni di potere provvedere direttamente all'intero ciclo di utilizzo.

La sedia wc "ANKARA", peraltro, è particolarmente indicata per l'utilizzo nei locali sprovvisti di servizi igienici di tipo tradizionale e abitati/frequentati da persone con difficoltà deambulatorie per le quali sarebbe problematico lo spostamento in altri piani o locali distanti per espletare i bisogni fisiologici. Comunque è fatto salvo ogni altro tipo di

**Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Direzione e Uffici Amministrativi
Via Santa Sofia 64, 95125 Catania
P. IVA 02772010878
Tel. 095/7384236; 095/7384245; 095/7384084**

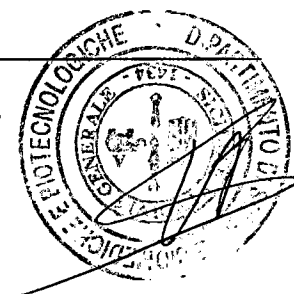



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Biometec

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Università di Catania




Sezione di Microbiologia

utilizzo, in quanto si presta molto bene ad essere impiegata sia in ambiti di relax (gite in caravan, camper, roulotte, barca o in tenda) o in occasione di emergenze (all'interno delle tende allestite dai servizi di protezione civile) o, ancora, in luoghi di lavoro (fissi o mobili) dove non è possibile, per motivi di spazio o per assenza dei servizi a rete, utilizzare i normali water a sciacquone ad acqua o quelli a funzionamento chimico.

La sedia wc in argomento risulta essere conforme, inoltre, alle norme tecniche EN 1022/05, EN 1728/00 e UNI 9083/87.

Catania, . . . 9 DIC 2022

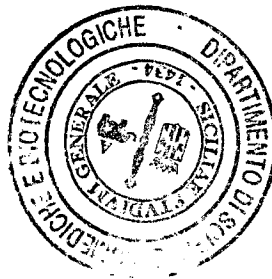

RESPONSABILE DELLA RICERCA



ISO 9001 : 2015
Certified Quality System

SEDIA WC A SECCO "ANKARA"

- ISTRUZIONI D'USO -

A) PRIMA DELL'UTILIZZO

1A) Munirsi della dotazione necessaria (si veda foto 1):

- sacchetto "rotondo";
- coperchio;
- bustina contenente polverina bianca ad effetto disinfettante e gelificante.



(foto 1)

2A) Sollevare il coperchio del water (foto 2) e riporre il sacchetto all'interno del foro del sedile (foto 3), in modo tale che la bordura del sacchetto si incastoni nella scanalatura del foro.



(foto 2)



(foto 3)



ISO 9001 : 2015
Certified Quality System



3A) Aprire la bustina e cospargerne il contenuto all'interno del sacchetto (foto 4) - essa gelificherà e disinfetterà i liquami (foto 5).



(foto 4)



(foto 5)

B) DURANTE L'UTILIZZO

1B) E' possibile gettare all'interno del sacchetto la carta igienica usata, eventuali salviettine igieniche e pannolini/pannoloni all'interno del sacchetto.

C) DOPO L'UTILIZZO

1C) Sovrapporre il coperchio del sacchetto sul sacchetto (foto 6), abbassare il sedilecoperchيو e applicare una decisa pressione con le mani sulla parte superiore del sedile coperchيو (foto 7), avendo cura di udire il "crack" sonoro, tipico della chiusura del sacchetto con il suo coperchيو.



(foto 6)



(foto 7)

2C) Effettuata la chiusura del coperchيو-sacchetto, estrarre il sacchetto e deporlo nel cestino porta rifiuti.